

GPS UR NOVA

Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede frihet, og det skaper trygghet for pårørende og pleiepersonalet.

KLASSISK ELEGANSE OG MODERNE STIL

Når du leter etter den perfekte GPS-enheten som kombinerer funksjon og eleganse, er Nova det åpenbare valget. Denne bemerkelsesverdige klokken tilbyr flere fordeler som gjør den til en ideell følgesvenn for både menn og kvinner med demens. Med en lang batteritid på opptil 5 dager, kan du være trygg på at klokken din alltid vil være klar.

PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|--|-----------|
| Tid mellom nye posisjoner | 15 sek. |
| Batteritid | 1-5 dager |
| Mulighet for geofence (ned til) | 20 meter |
| Mulighet for låsbar klokkeirim | Ja |
| Mulighet for hjemmesone-strømsparer | Ja |
| Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett | Ja |
| Vanntett* | IP67* |
| Mulighet for toveistale | Ja |
| Lader og ledning til lading medfølger | Ja |

* Du kan ta Nova inn i dusjen eller rengjøre/vaske klokken i lunkent eller varmt vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet i vaskemaskinen eller miste apparatet i toalettet, tåler klokken også dette. Enhetene tåler svømming i enten svømmebasseng eller på stranden i sjøvann.



VEILEDNING

Skjermen på klokken er i utgangspunktet av. Trykk på knappen på siden av klokken for å aktivere skjermen. Alternativt kan du stille klokken til å aktivere skjermen når du beveger armen eller ha den permanent på. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan påvirke batteritiden.

Hvis klokken har gått tom for strøm, kan den lades ved å plassere den i magnetladeren.

SLIK LADER DU KLOKKEN

Hvis det ikke er noe lys på skjermen når du trykker på knappen, har klokken gått tom for strøm. Sett klokken inn i laderen. Det tar omtrent 1 time og 45 minutter å lade klokken.

SLIK SER DU STATUS FOR KLOKKEN

Dobbeltklikk på klokkes skjerm. Du vil nå ha muligheten til å se klokkes ID-nummer, nettverksstatus og batterinivå i prosent.

SLIK SLÅR DU PÅ KLOKKEN

Klokken slås på automatisk så snart den plasseres i laderen.

SLIK ENDRER DU OPPSETTET

Hvis du vil endre klokkeoppsettet, f.eks. endre urskive, alarmknapp og lignende, må du ha tilgang til administrasjonssystemet.


SLIK RINGER DU FRA KLOKKEN ELLER AKTIVERER ALARMTRYKK

Trykk én gang på knappen på siden av klokken. Bekreft anropet/alarmtrykket ved å trykke på skjermen.

Alarmmottakere vil nå få beskjed om alarmtrykket via appen.

Hvis enheten er konfigurert til å starte et anrop, vil enheten ringe etter bekrefnelsen på skjermen.

* Vær oppmerksom på at vi løbende oppdaterer features, ny funksjonalitet, samt veiledninger på vores hjemmeside. Derfor råder vi dig til å se på www.stellacare.dk/vejledninger, for mere information. Nogle funktioner skal aktivéres inden bestilling, kontakt Stelle Care, for at høre mere om vores forskellige muligheder.

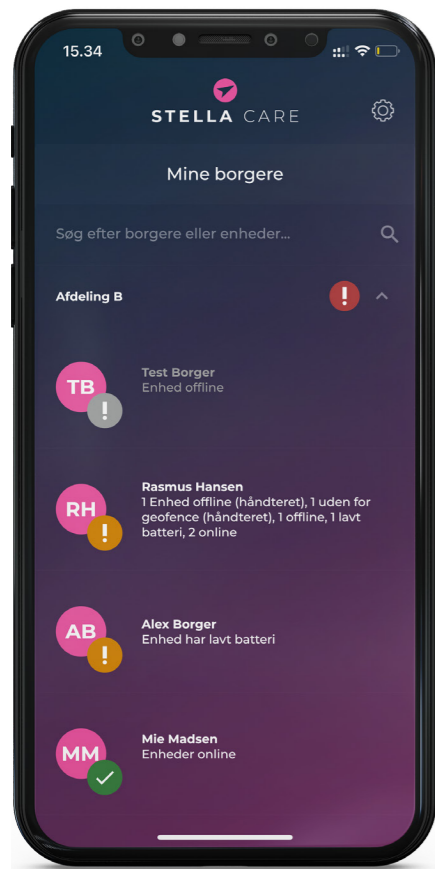

SLIK BRUKER DU APPEN

Det eneste du trenger er en GPS-enhet og vår app.


GPS-enheten bæres av personen med demens.
Appen brukes av helsepersonell eller en pårørende.

Last ned appen vår fra App Store eller Google Play først.
Søk etter "**Stella Care**" og velg appen "**Stella Care**".

Når du er logget inn i appen, får du en oversikt over brukerne du har tilgang til å følge. De fleste brukerne har bare én enhet, men noen har flere. Du kan bruke søkeboksen for å finne brukere hvis du har tilgang til flere.

Listen over brukere er sortert etter kritikalitet.

- Rød – Geofence-larm
- Grå – Offline
- Gul – Batterilarm
- Grønn – Allt är ok

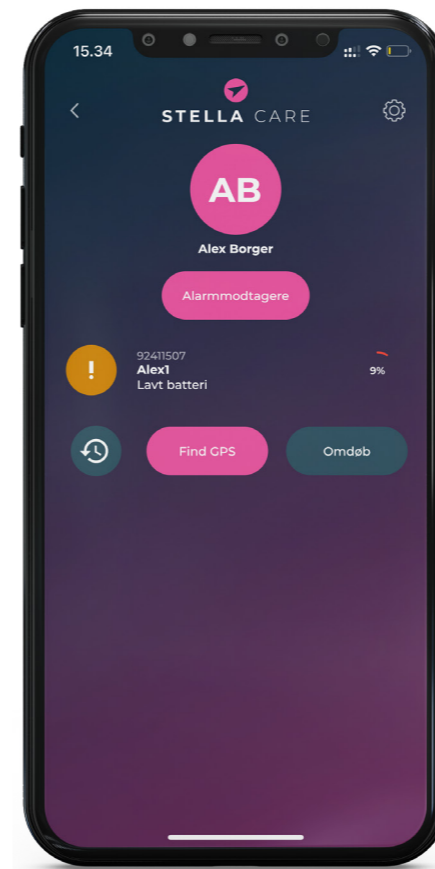


SLIK FINNER DU EN BORGER

VÄLJ DEN ANVÄNDARE SOM DU VILL HITTA I DEN FÖREGÅENDE LISTAN.
DU SER NU EN ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDARENS ENHETER.

TRYCK PÅ DEN AV ANVÄNDARENS ENHETER SOM DU VILL HITTA.

DU HAR NU MÖJLIGHET ATT:

- > **Vis enhetens historikk** – Hvis du trykker på ikonet,  vil det være mulig å se en historikk over alarmer og samtaler til og fra enheten.
- > **Finn GPS** – Her kan du se GPS-enhetens nåværende posisjon på et kart. Brukerens posisjon oppdateres automatisk hvert 15. sekund hvis du søker etter brukeren.
- > **Bytt navn** – Under "Bytt navn" har du muligheten til å endre enhetens navn. For eksempel, Natt og Dag.
- > Lengst til høyre kan du se hvor mye batteri enheten har i prosent.
- > Under hver enhet vises enhetens ID-nummer og status, for eksempel geofence, lavt batteri, OK eller frakoblet.
- > Hvis det er flere personer som mottar alarmer for brukeren, har du muligheten til å se hvem som er registrert som alarmmottaker ved å trykke på "**alarmmottakere**."

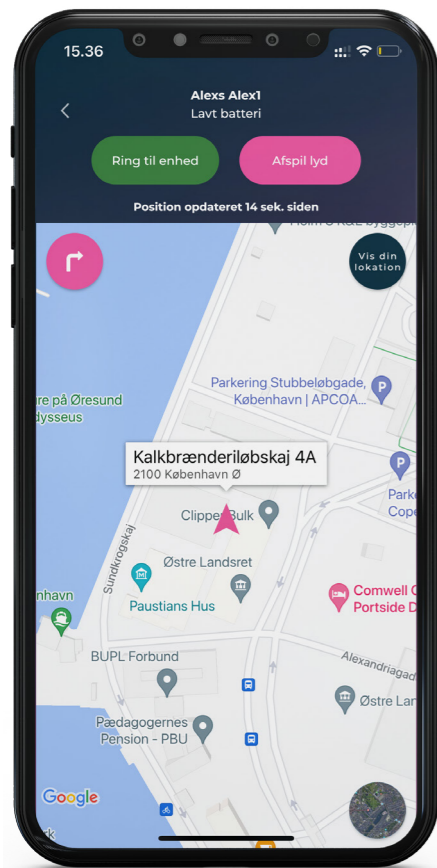

SLIK SER MAN BRUKERENS POSISJON PÅ ET KART





Hvis du vil se enhetens posisjon på et kart, trykker du på "Finn GPS."


Når du har trykket på "Finn GPS" i oversikten over brukeren enheter, vil du få en kartvisning som viser hvor brukeren/enheten befinner seg.

Øverst på siden vises brukeren navn, enhetens status, og når enheten sist sendte sin posisjon til systemet. Ved å trykke på knappen "Ring til enhet" starter du et samtale til brukeren enhet. Enheten kobler selv opp samtalen.

Hvis du har problemer med å finne enheten, kan du trykke på knappen "Spill opp lyd" for å få enheten til å spille av lyd i 20 sekunder, slik at den kan bli funnet igjen.

PÅ KARTET HAR DU FØLGENDE MULIGHETER

-  Se din egen posisjon på kartet. Den blå prikken viser din posisjon.
-  Trykk på denne for å se brukeren nåværende adresse/posisjon.
-  Her kan du veksle mellom vanlig kart og satellittkart.
-  Trykk på denne knappen for å få veibeskrivelse til enhetens posisjon.

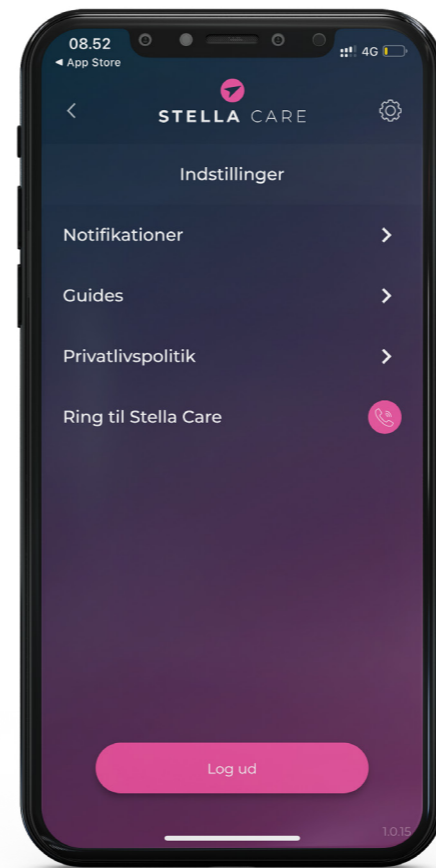

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGENE DINE


I appen kan du gjøre flere innstillinger for kontoen din.

- > **Meldinger** – Her kan du aktivere eller deaktivere vibrasjon og lyd ved alarmer eller endre lyden for de ulike alarmene.
- > **Veiledninger** – Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke enheten, appen eller administrasjonssystemet, finner du veiledning om hvordan du gjør dette her.
- > **Personvernpolicy** – Les om personvernpolicyen for bruk av appen.
- > **Ring Stella Care** – Hvis du har problemer med appen eller har noen spørsmål, kan du alltid kontakte oss ved å trykke her. Kundeservicen vår er åpen døgnet rundt, hele året.

HAR DU VALGT LÅSBAR KLOKKEREIM?


Hvis det er en lås på reima, bruker du et lite verktøy for å åpne spennen.

HUSK å ta vare på verktøyet. Du kan eventuelt feste den til ladekabelen.

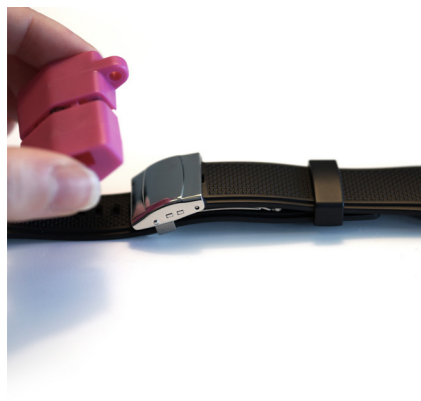


1

Plasser verktøyet løst oppå låsen.

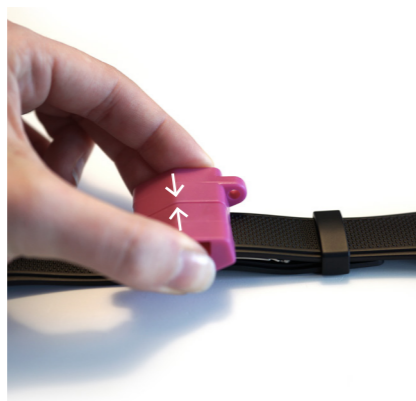

2

Trykk nå forsiktig på verktøyet. Verktøyet har to tapper som må treffe de to hullene på spennen.

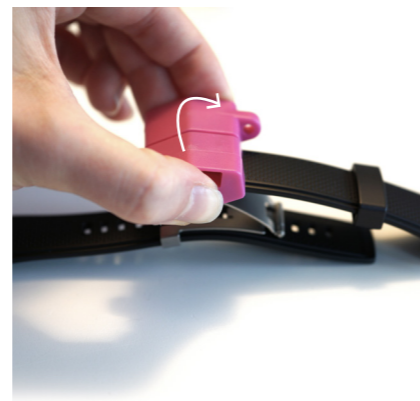

3

Når låsen løsner, kan du løfte låsen opp og ta av klokken.



STELLA CARE

Vi designer og udvikler systemer som skaber trykghet og frihet
for personer med demens, pleiepersonale og pårørende.

Vårt oppdrag er å være best i verden til å finne
folk som er savnet.

Stella Care ApS | Tlf. 42 42 90 60 | www.stellacare.dk