

BASIC GPS-BOKS

Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede frihet, og det skaper trygghet for pårørende og pleiepersonalet.

TRYKK PÅ DEN ENHETEN DU HAR

Det er forskjell på våre basic-enheter, derfor bes du trykke på den enheten du har.
Har den én eller to knapper på siden?




SE VEILEDNINGEN

Hvis enheten ser slik ut, har den bare én knapp



SE VEILEDNINGEN

Hvis enheten ser slik ut, har den to knapper.

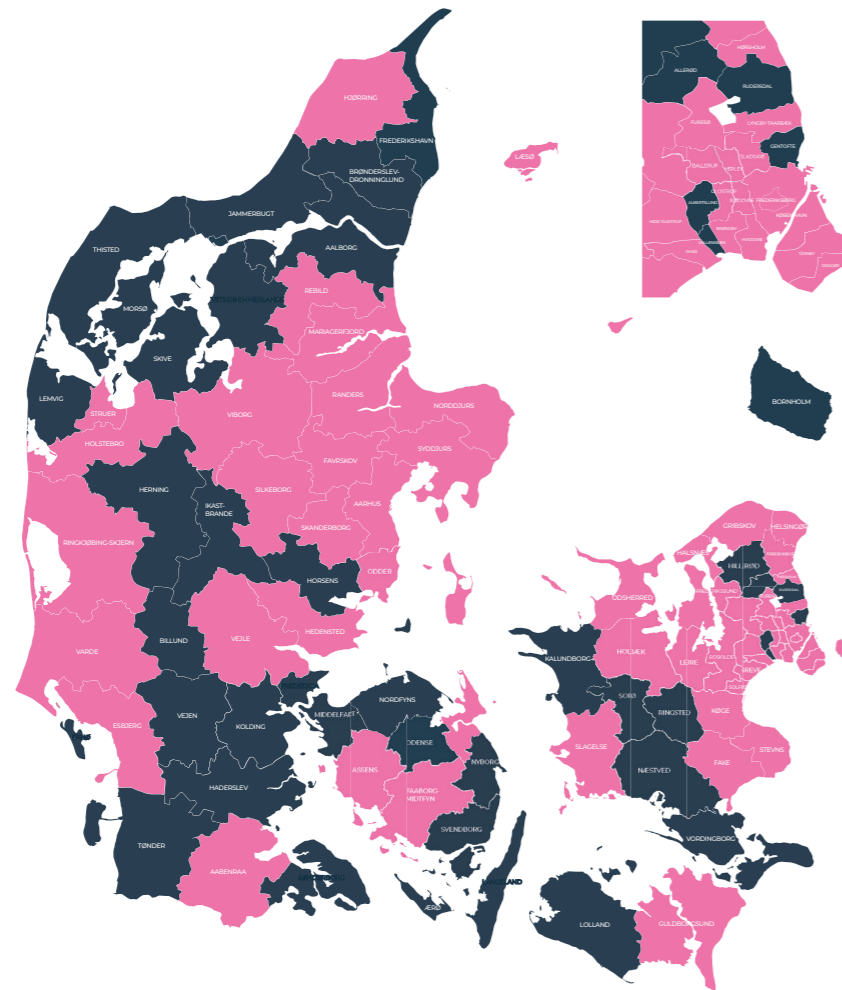

Takk for at du valgte Care Tracker-systemet fra Stella Care.

Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at du er fornøyd med produktet vårt og får optimal frihet ut av det.

I STELLA CARE KJEMPER VI FOR...

... at ingen med demens skal forsvinne sporløst.

Alle må være trygge, både den som har demens, pårørende og pleiepersonale.

Derfor vil vi være best på å utvikle enheter som kan lokalisere personer med demens.

ENKELT OG ATTRAKTIVT

Vår løsning er enkel å bruke og attraktiv for personen med demens å bruke. Det gjør at den demensrammede raskt føler at produktet er en naturlig del av hverdagen.

DU KAN ALLTID FÅ HJELP

Det er viktig for oss at du alltid føler deg trygg, derfor kan du ringe oss døgnet rundt.

Vi kan alltid kontaktes på: info@stellacare.dk eller +45 42 42 90 60.

GRUNNLEGGENDE GPS-BOKS - DISKRÉ, MYK OG STILFULL

Basic er en liten GPS-sporer og måler bare 6,2 x 1,7 x 4,5 cm. Du får nye posisjoner fra GPS-sporeren hvert andre minutt. Inkludert en halssnor slik at GPS-en kan bæres rundt halsen.

PRODUKTEGENSKAPER

Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing	15 sek.
Batteritid	40-60 timer
Mulighet for geofence (ned til)	20 meter
Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett	Ja
Vanntett*	IP65*
Mulighet for toveistale	Ja
Halskant inkludert	Ja
Lader og ledning til lading medfølger	Ja

* Du kan ta Basic inn i dusjen eller rengjøre/vaske den i lunke vann.



VEILEDNING

På siden av enheten er det en knapp med en telefon. Trykk og hold knappen inne for å slå på enheten. Når den grønne lampen blinker, er enheten på. Hvis det ikke er lys som blinker, kan det skyldes at enheten mangler strøm.



SLÅ ENHETEN PÅ OG AV

For å slå på enheten holder du inne knappen på siden av enheten. Det gjør du inntil lysene blinker. Enheten slår seg automatisk på hvis den settes i ladestasjonen.

Hvis du ønsker å slå av enheten, må du hold inne «SOS»-knappen og knappen på siden i ca. 2 sekunder. Deretter vibrerer enheten og lysene slås av.

SLIK LADER DU ENHETEN

For å lade enheten setter du enheten i ladestasjonen som følger med. Hvis enhetens lysdiode lyser konstant blått, lades enheten. Når den blå LED-lampen slutter å lyse, betyr det at enheten er fulladet.

En full opplading tar omtrent 3 timer.

RING OPP FRA ENHETEN

Det er mulig å stille inn GPS-enheten slik at den ringer opp en pårørende når man holder "SOS" -knappen inne i ca. 3 sekunder.

* Vi oppdaterer kontinuerlig funksjoner, ny funksjonalitet, samt instruksjoner på nettstedet vårt. Derfor råder vi deg til å se på www.stellacare.dk/guidelines, for mer informasjon. Noen funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stelle Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.

GRUNNLEGGENDE GPS-BOKS - DISKRÉ, MYK OG STILFULL

Basic er en liten GPS-sporer og måler bare 6,2 x 1,7 x 4,5 cm. Du får nye posisjoner fra GPS-sporeren hvert andre minutt. Inkludert en halssnor slik at GPS-en kan bæres rundt halsen.

PRODUKTEGENSKAPER

Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing	15 sek.
Batteritid	40-60 timer
Mulighet for geofence (ned til)	20 meter
Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett	Ja
Vanntett*	IP67*
Mulighet for toveistale	Ja
Halskant inkludert	Ja
Lader og ledning til lading medfølger	Ja

* Du kan ta Basic+ inn i dusjen eller rengjøre/vaske den i lunkent vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet i vaskemaskinen eller miste apparatet i toalettet, tåler det typisk dette også.



VEILEDNING

På siden av enheten er det en knapp med en telefon. Trykk og hold knappen inne for å slå på enheten. Når den grønne lampen blinker, er enheten på. Hvis det ikke er lys som blinker, kan det skyldes at enheten mangler strøm.



SLÅ ENHETEN PÅ OG AV

For å slå på enheten, hold nede den øverste knappen på siden av enheten. Det gjør du inntil enheten vibrerer. Enheten slår seg automatisk på hvis den settes i ladestasjonen.

Hvis du ønsker å slå av enheten, må du først holde SOS-knappen inne og like etterpå den øverste knappen på siden. Hold nå begge knappene inne til

enheten vibrerer. Enheten slås nå av, og lysene slutter å blinke etter ca. 10 sekunder.

SLIK LADER DU ENHETEN


For å lade enheten setter du enheten i ladestasjonen som følger med. Når enhetens lysdioder blinker grønt og rødt på siden, og ladestasjonens lys i bunnen pulserer sakte, lades enheten.

En full opplading tar omtrent 3 timer.

RING OPP FRA ENHETEN

Det er mulig å stille inn GPS-enheten slik at den ringer opp en pårørende når man holder "SOS" -knappen inne i ca. 3 sekunder.

* Vi oppdaterer kontinuerlig funksjoner, ny funksjonalitet, samt instruksjoner på nettstedet vårt. Derfor råder vi deg til å se på www.stellacare.dk/guidelines, for mer informasjon. Noen funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stelle Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.

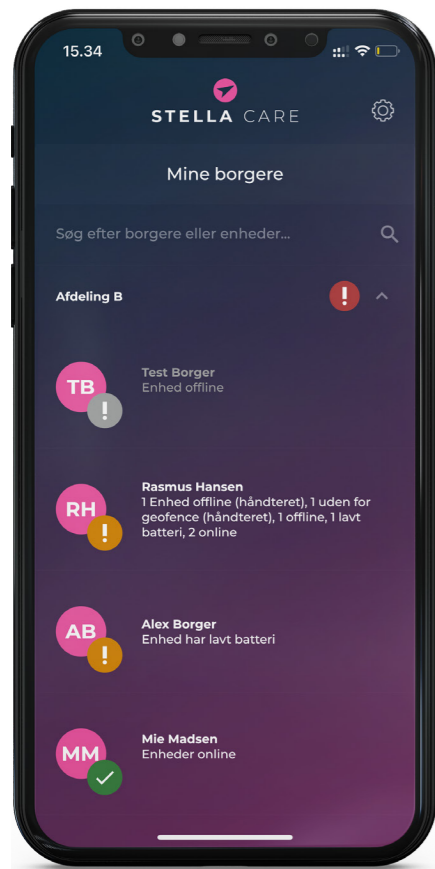

SLIK BRUKER DU APPEN

Det eneste du trenger er en GPS-enhet og vår app.


GPS-enheten bæres av personen med demens.
Appen brukes av helsepersonell eller en pårørende.

Last ned appen vår fra App Store eller Google Play først.
Søk etter "**Stella Care**" og velg appen "**Stella Care**".

Når du er logget inn i appen, får du en oversikt over brukerne du har tilgang til å følge. De fleste brukerne har bare én enhet, men noen har flere. Du kan bruke søkeboksen for å finne brukere hvis du har tilgang til flere.

Listen over brukere er sortert etter kritikalitet.

- Rød – Geofence-larm
- Grå – Offline
- Gul – Batterilarm
- Grønn – Allt är ok

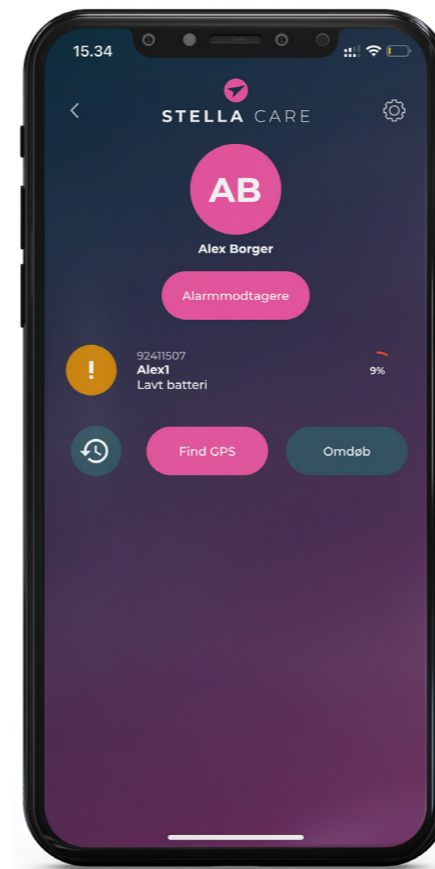


SLIK FINNER DU EN BORGER

VÄLJ DEN ANVÄNDARE SOM DU VILL HITTA I DEN FÖREGÅENDE LISTAN.
DU SER NU EN ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDARENS ENHETER.

TRYCK PÅ DEN AV ANVÄNDARENS ENHETER SOM DU VILL HITTA.

DU HAR NU MÖJLIGHET ATT:

- > **Vis enhetens historikk** – Hvis du trykker på ikonet,  vil det være mulig å se en historikk over alarmer og samtaler til og fra enheten.
- > **Finn GPS** – Her kan du se GPS-enhetens nåværende posisjon på et kart. Brukerens posisjon oppdateres automatisk hvert 15. sekund hvis du søker etter brukeren.
- > **Bytt navn** – Under "Bytt navn" har du muligheten til å endre enhetens navn. For eksempel, Natt og Dag.
- > Lengst til høyre kan du se hvor mye batteri enheten har i prosent.
- > Under hver enhet vises enhetens ID-nummer og status, for eksempel geofence, lavt batteri, OK eller frakoblet.
- > Hvis det er flere personer som mottar alarmer for brukeren, har du muligheten til å se hvem som er registrert som alarmmottaker ved å trykke på "**alarmmottakere**."

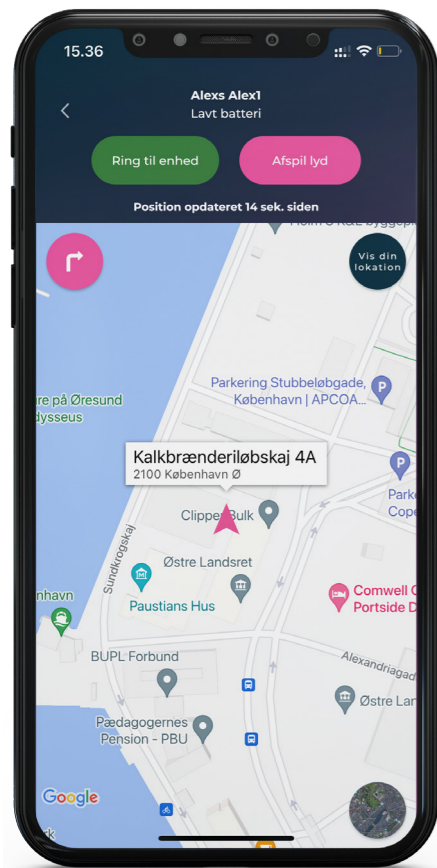

SLIK SER MAN BRUKERENS POSISJON PÅ ET KART





Hvis du vil se enhetens posisjon på et kart, trykker du på "Finn GPS."


Når du har trykket på "Finn GPS" i oversikten over brukers enheter, vil du få en kartvisning som viser hvor brukeren/enheten befinner seg.

Øverst på siden vises brukers navn, enhets status, og når enheten sist sendte sin posisjon til systemet. Ved å trykke på knappen "Ring til enhet" starter du et samtale til brukers enhet. Enheten kobler selv opp samtalen.

Hvis du har problemer med å finne enheten, kan du trykke på knappen "Spill opp lyd" for å få enheten til å spille av lyd i 20 sekunder, slik at den kan bli funnet igjen.

PÅ KARTET HAR DU FØLGENDE MULIGHETER

-  Se din egen posisjon på kartet. Den blå prikken viser din posisjon.
-  Trykk på denne for å se brukers nåværende adresse/posisjon.
-  Her kan du veksle mellom vanlig kart og satellittkart.
-  Trykk på denne knappen for å få veibeskrivelse til enhets posisjon.

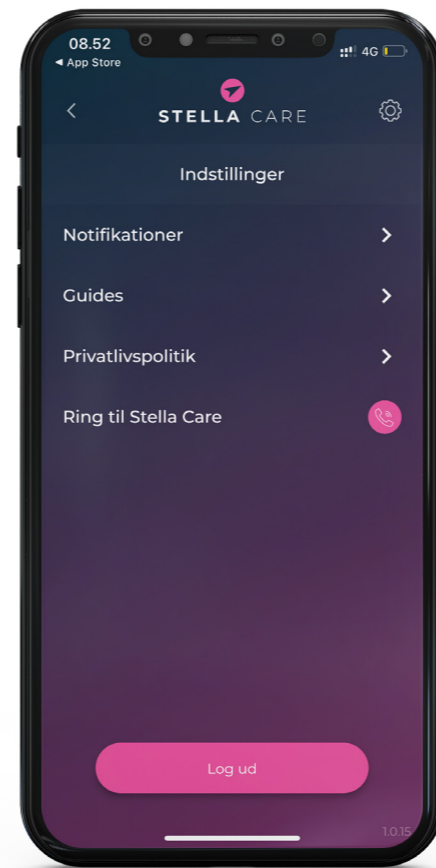

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGENE DINE

I appen kan du gjøre flere innstillinger for kontoen din.

- > **Meldinger** – Her kan du aktivere eller deaktivere vibrasjon og lyd ved alarmer eller endre lyden for de ulike alarmene.
- > **Veiledninger** – Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke enheten, appen eller administrasjonssystemet, finner du veiledning om hvordan du gjør dette her.
- > **Personvernpolicy** – Les om personvernpolicyen for bruk av appen.
- > **Ring Stella Care** – Hvis du har problemer med appen eller har noen spørsmål, kan du alltid kontakte oss ved å trykke her. Kundeservicen vår er åpen døgnet rundt, hele året.



STELLA CARE

Vi designer og udvikler systemer som skaber trykghet og frihet
for personer med demens, pleiepersonale og pårørende.

Vårt oppdrag er å være best i verden til å finne
folk som er savnet.

Stella Care ApS | Tlf. 42 42 90 60 | www.stellacare.dk