

GPS-DOSA BASIC

Stella Care skyddar personer med demenssjukdom från att gå vilse. Vi erbjuder ett lokaliseringssystem och GPS-enheter i världsklass. Det ger personer med demenssjukdom frihet och skapar trygghet för anhöriga och vårdare.

TRYCK PÅ DEN ENHET DU HAR

Det finns skillnader mellan våra grundläggande enheter, så tryck på den enhet du har.
Har den en eller två knappar på sidan?




SE MANUAL

Om din enhet ser ut så här har den bara en knapp.



SE MANUAL

Om din enhet ser ut så här har den bara en knapp.

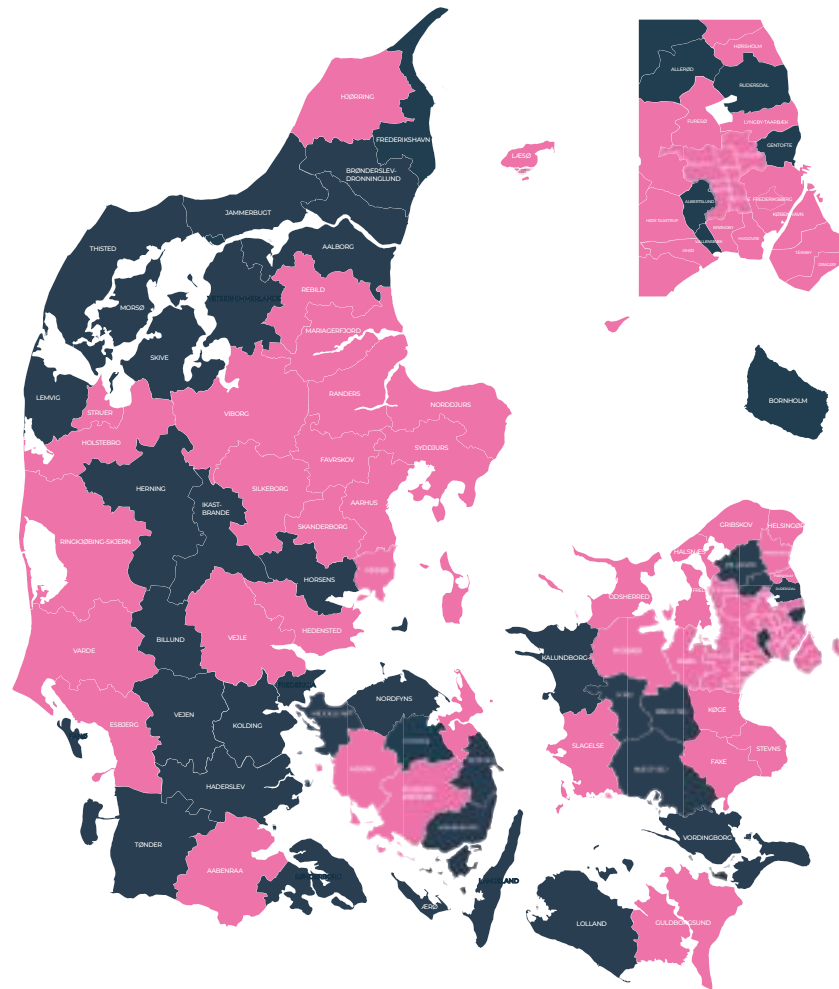

Tack för att du har valt Care Tracker-systemet från Stella Care.

Vi gör vårt bästa för att du ska vara nöjd med vår produkt och för att ge dig optimal frihet.

VI PÅ STELLA CARE KÄMPAR FÖR ...

att inga personer med demens ska försvinna spårlöst.

Alla ska vara trygga – både personerna med demens, de anhöriga och vårdpersonalen.

Därför vill vi vara bäst på att utveckla enheter som kan lokalisera personer med demens.

ENKELT OCH TILLTALANDE

Vår lösning är enkel att använda och tilltalande att bära för personen med demens. Detta gör att den demensdrabbade snabbt känner att produkten är en naturlig del av vardagen.

DU KAN ALLTID FÅ HJÄLP

Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg. Därför kan du ringa till oss dygnet runt.

Du kan alltid kontakta oss på: info@stellacare.dk eller +45 42 42 90 60.

GPS-DOSAN BASIC – DISKRET, MJUK OCH LÄCKER FORM

Basic är en liten GPS-tracker, den mäter endast 6,2 x 1,7 x 4,5 cm. Du får nya positioner från GPS-trackern varannan minut. Det följer med ett halsband, så att GPS:en kan bäras runt halsen.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Tid mellan nya positioner under aktiv spårning	2 min.
Batteritid	48 timmar
Möjlighet till geofence (ner till)	50 meter
Spårning via användarvänlig app på telefon, dator eller surfplatta	Ja
Vattentät*	IP65*
Möjlighet till tvåvägssamtal	Ja
Halsringning ingår	Ja
Laddare och sladd för laddning ingår	Ja

* Du kan ta Basic+ in i duschen eller rengöra/tvätta den i ljummet vatten.



MANUAL

På sidan av enheten finns en knapp med en telefon. Håll knappen nedtryckt för att slå på enheten. När den gröna lampan blinkar är enheten på. Om det inte finns några lampor som blinkar kan det bero på att enheten har för lite ström.



SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN

Om du vill slå på enheten håller du knappen på sidan av enheten intryckt. Det gör du tills lamporna blinkar. Enheten slås på automatiskt om den sätts i laddningsstationen.

Om du vill stänga av enheten måste du hålla in "SOS"-knappen och knappen på sidan i cirka 2 sekunder. Då vibrerar enheten och lamporna slocknar.

SÅ HÄR LADDAR DU ENHETEN

För att ladda enheten sätter du i enheten i den medföljande laddningsstationen.

Om enhetens lysdiod lyser konstant blått laddas enheten. När den blå lysdioden slutar lysa betyder det att enheten är fulladdad.

En full laddning tar ungefär 3 timmar.

RINGA UPP FRÅN ENHETEN

Det är möjligt att ställa in GPS-enheten så att den ringer upp en anhörig när du håller in "SOS"-knappen i ca 3 sekunder.

* Vi uppdaterar kontinuerligt egenskaper, nya funktioner och guider på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du tittar på www.stellacare.dk/vejledninger, för mer information. Vissa funktioner måste aktiveras innan du beställer. Kontakta Stella Care för att få veta mer om våra olika alternativ.

GPS-DOSAN BASIC – DISKRET, MJUK OCH LÄCKER FORM

Basic är en liten GPS-tracker, den mäter endast 6,2 x 1,7 x 4,5 cm. Du får nya positioner från GPS-trackern varannan minut. Det följer med ett halsband, så att GPS:en kan bäras runt halsen.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Tid mellan nya positioner under aktiv spårning	15 sek.
Batteritid	40-60 timmar
Möjlighet till geofence (ner till)	20 meter
Spårning via användarvänlig app på telefon, dator eller surfplattasurfplatta	Ja
Vattentät*	IP67*
Möjlighet till tvåvägssamtal	Ja
Halsringning ingår	Ja
Laddare och sladd för laddning ingår	Ja

* Du kan ta Basic+ in i duschen eller rengöra/tvätta den i ljummet vatten. Skulle du råka stoppa in enheten i tvättmaskinen eller tappa enheten i toaletten så klarar den vanligtvis också detta.



MANUAL

På sidan av enheten finns en knapp med en telefon. Håll knappen nedtryckt för att slå på enheten. När den gröna lampan blinkar är enheten på. Om det inte finns några lampor som blinkar kan det bero på att enheten har för lite ström.



SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN

För att slå på enheten trycker du på och håller in den övre knappen på sidan av enheten. Det gör du tills enheten vibrerar. Enheten slås på automatiskt om den sätts i laddningsstationen.

Om du vill stänga av enheten måste du först hålla ned SOS-knappen och omedelbart därefter den översta knappen på sidan. Håll nu båda knapparna nedtryckta tills enheten vibrerar.

Enheten stängs nu av och lamporna slutar blinka efter ca 10 sekunder.

SÅ HÄR LADDAR DU ENHETEN

För att ladda enheten sätter du i enheten i den medföljande laddningsstationen. När enhetens lysdioder blinkar grönt och rött på sidan och laddningsstationens lampa längst ner pulserar långsamt laddas enheten.

En full laddning tar ungefär 3 timmar.

RINGA UPP FRÅN ENHETEN

Det är möjligt att ställa in GPS-enheten så att den ringer upp en anhörig när du håller in "SOS"-knappen i ca 3 sekunder.

* Vi uppdaterar kontinuerligt egenskaper, nya funktioner och guider på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du tittar på www.stellacare.dk/vejledninger, för mer information. Vissa funktioner måste aktiveras innan du beställer. Kontakta Stella Care för att få veta mer om våra olika alternativ.

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

Det enda du behöver är en GPS-enhet och vår app.

- > GPS-enheten bärs av personen med demens.
- > Appen används av vårdpersonal eller anhöriga.


VAD GÖR DU OM PERSONEN INTE HAR KOMMIT TILLBAKA HEM?

I appen finns det en knapp som heter "Hitta GPS". Om du trycker på den visas personens position på en karta. Personens position uppdateras automatiskt ca var 15:e sekund om du söker efter personen.

HUR TAR DU EMOT INFORMATION OM ENHETEN?

För att göra det enkelt för dig som anhörig eller vårdgivare ger appen dig möjlighet att se viktig information om GPS:en.

- > Du kan t.ex. se batterinivå och om GPS:en är på eller av.
- > Du kan få larm genom appen om personen är utanför geofence-området.

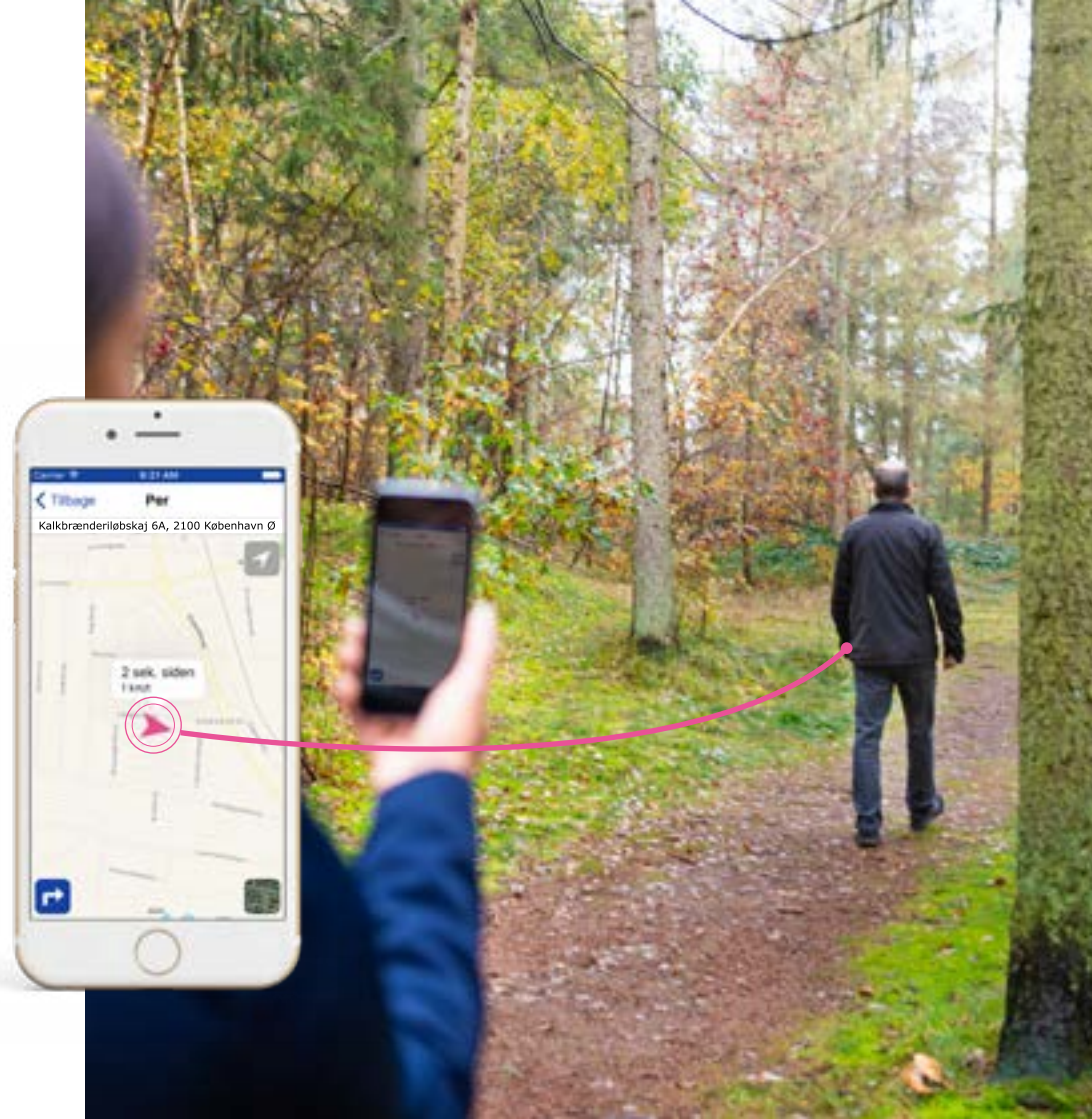

TRE SAKER DU BEHÖVER VETA NÄR DU VÄLJER SAMARBETSPARTNER

HUR LÄNGE KAN DU VÄNTA INNAN DU FÅR EN NY POSITION?

Ju längre tid det går innan du får en ny position, desto längre tid tar det innan du vet var personen är. Hos oss tar det bara några sekunder mellan varje ny position när man söker en person. Det gör det eftersom varje sekund är viktig när en person med demenssjukdom har försvunnit.

VARFÖR ÄR DET SKILLNAD PÅ PRODUKTERNAS BATTERITID?

Strömförbrukningen beror i första hand på hur ofta du vill ta emot positioner från enheten. Få positioner ger längre batteritid, men större risk att personen kommer långt bort utan att någon märker det.

GPS-ENHETER SOM ÄR VÄRDIGA ATT BÄRA FÖR DEN DEMENSDRABBADE

Våra produkter finns i många olika utföranden, till exempel som armbandsur eller som en liten dosa. Produkterna är alla diskreta och värdiga att bära för den demenssjuke.



LADDA NER VÅR APP "CARE TRACKER"

När du är inloggad i appen kan du se en översikt över alla dina anslutna GPS-enheter.



GPS-enheten befinner sig utanför geofence. Anges med larmsymbol och texten "Utanför geofence".


Den här GPS-enheten har lågt batteri och måste laddas. Det indikeras med en varningssymbol och texten "Lågt batteri".

En grå ikon indikerar att GPS-enheten är avstängd eller saknar uppkoppling. Kontrollera att GPS:en har ström och att den är påslagen.

Statusen för den här GPS-enheten är normal. Det är inget som användaren måste vara uppmärksam på.

KOM IGÅNG MED APP'EN

När du har valt en GPS-enhet från listan har du följande alternativ.

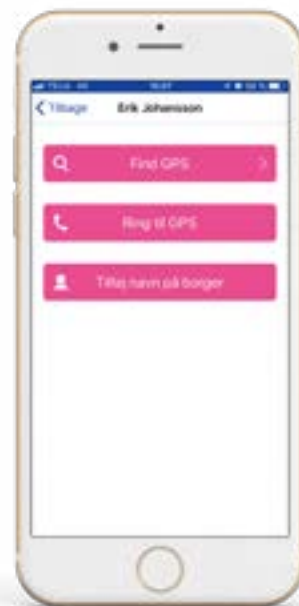

En karta öppnas och du kan nu se GPS-enhetens position.

Ett samtal görs till GPS-enheten, som lyfter luren själv efter att den har ringt en eller två gånger. Därefter kan man prata.


Här kan du ändra namnet på den person som bär GPS-enheten.

HITTA GPS

När du har tryckt på "Hitta GPS" visas en karta. Den rosa pilen visar GPS-spårarens position och tiden ovan anger när positionen skickades. Den närmaste adressen visas överst.

Den blå prickén visar din egen position. För att ta bort eller visa den blå prickén, trycker du på på symbolen i det övre högra hörnet.

Vill du växla mellan original- eller satellitkarta, trycker du på knappen i det nedre högra hörnet. För att visa en rutt från dig till GPS:en, trycker du på pilen längst ner i vänstra hörnet.

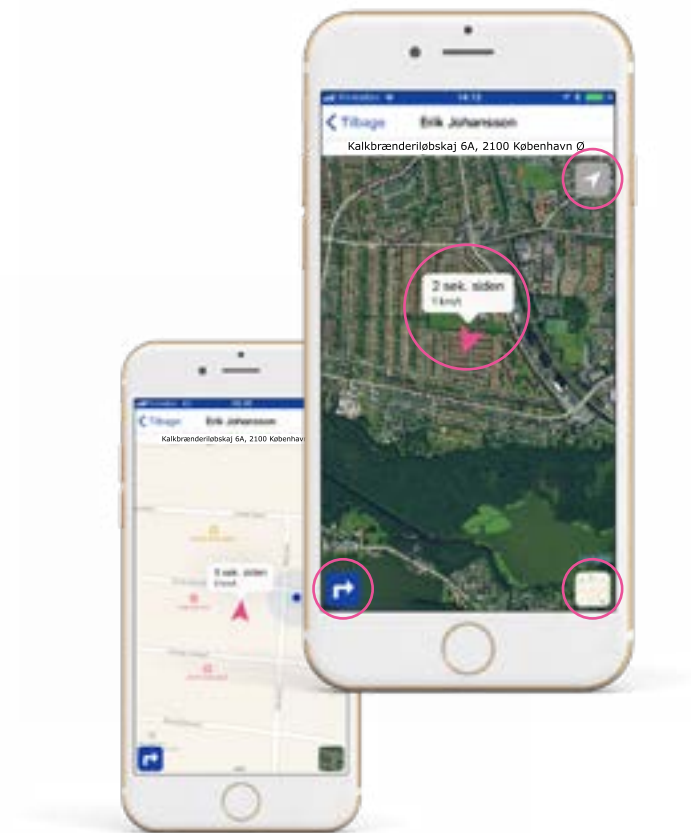



STELLA CARE

Vi designar och utvecklar system som skapar trygghet och frihet
för personer med demens, vårdpersonal och anhöriga.

Vår mission är att vara de bästa i världen på att lokalisera
saknade personer.